

LA * FORETT


REVEAL YOURSELF



Terapia de
Radiofrecuencia (RF)



Electro estimulación
Muscular (EMS)

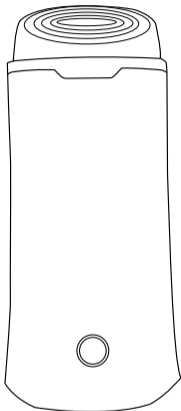


MILA

Rejuvenecedor facial

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el dispositivo y consérvelo para futuras consultas.

Descripción general del producto

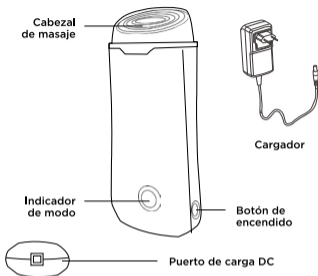

Guía de uso

! Por favor cargue el dispositivo completamente antes de usar

1. Presione el botón de encendido 2 segundos para encender, comienza a funcionar (luz roja encendida); presione nuevamente el botón de encendido para pasar al siguiente modo (luz azul encendida); presione el botón de encendido una vez más para pasar al siguiente modo (luz púrpura encendida); presione 2 segundos para apagar.

2. Durante la carga: la luz indicadora es roja durante la carga. Cuando está completamente cargada, la luz azul permanece encendida. Cuando no tiene energía, la luz

azul parpadea una vez y luego se apaga automáticamente.

Especificaciones

Potencia: 15W

Tamaño: 143 x 46 x 59 mm

Peso: 124g

Entrada de energía: 5V 3A

Tiempo de uso: aprox. 1 hora aprox.

Tiempo de carga: aprox. 3 horas aprox.

Capacidad de la batería: 1200 mAh

Instrucción de las funciones

RF (Radiofrecuencia): De 1.1 MHZ hace que las moléculas del tejido de la piel vibren y generen calor, activa el tejido de la piel, deja tu rostro suave y terso, ayuda a la piel a luchar contra el envejecimiento, reduce las arrugas de la frente, líneas finas, arrugas en surcos, caída de la línea de la mandíbula, etc. Mejora la elasticidad de la piel y reduce las ojeras.

EMS (Electro estimulación muscular): el modo EMS también se denomina microcorriente. Su función principal es relajar los espasmos musculares, aumentar el ejercicio, reducir y prevenir la atrofia muscular, aumentar la circulación sanguínea local y la recuperación muscular. Usando una corriente débil para estimular los músculos y la linfa, contrae los músculos para lograr un efecto reafirmante. Durante su uso, sentirá una ligera sensación de acupuntura, lo que indica que la corriente ha atravesado la piel y ha afectado a la capa muscular. Cuando lo use

nuevamente, podrá sentir que el músculo está temblando.

RF + EMS posee tres modos de funcionamiento: bajo, medio y alto.

Instrucciones

! Úselo una vez haya cargado el dispositivo completamente

1. Después de limpiarse la cara, lave bien la piel y una vez la piel esté totalmente seca aplique la loción en gel, para evitar mezclar el residuo del limpiador facial con la loción en gel.

Presione dos segundos para encender la máquina, coloque el cabezal del sensor contra la piel y úselo sobre ella.



Mueve el cabezal en la dirección de la flecha.

Ruta de uso



Dependiendo de la piel y las sensaciones corporales de cada persona, desplace el cabezal tirando hacia arriba de manera circular, comenzando la primera vez desde el primer nivel, de acuerdo con la sensación de calor del cuerpo (las ondas de RF calientan la piel) y la fuerza del masaje muscular por la microcorriente. Gradualmente aumente el nivel y elija aquel que no le genere molestias.

2. No mantenga el cabezal en el mismo lugar más de 3 segundos, puede repetir de 2 a 3 veces. Cuando se sienta un poco caliente, muévase al siguiente lugar inmediatamente.
3. Según el estado de la piel cuando se utiliza la función RF, la sensación de temperatura será diferente.
4. ¡Limpie después de su uso! Limpie y seque el cabezal de masaje, asegúrese de que el dispositivo esté completamente seco antes de guardarlo.

Nota: No lo use en párpados. Los párpados son más delgados que el resto de la piel y pueden lesionarse.

Limpieza y mantenimiento

1. Con el rostro libre de maquillaje, lave a profundidad con su limpiador facial regular y seque de forma prolija, es necesario que su rostro esté completamente seco para aplicar la solución cosmética en gel y así evitar que los residuos del limpiador facial se mezclen con el gel.
2. Después de usar el dispositivo, use una toalla de

papel humedecida repetidamente en agua limpia y pásela por el cabezal mas de 3 veces, asegúrese de haber eliminado cualquier residuo que haya quedado en el dispositivo. Una vez que la máquina esté completamente seca, guárdela.

3. El cabezal de masaje debe secarse al aire para evitar la exposición directa.
4. Evite el contacto con sustancias alcohólicas o ácidas.
5. Si no utiliza este dispositivo durante mucho tiempo, debe revisarlo periódicamente.

Precauciones de seguridad

Para garantizar el uso correcto de este producto, lea detenidamente todas las precauciones de seguridad antes de usarlo. Estas medidas pueden ayudarlo a usar el producto correctamente y evitar lesiones personales, daños a la propiedad, a usted u otras personas. El contenido de las precauciones de seguridad es el siguiente, siga las regulaciones pertinentes de las precauciones de seguridad!



Prohibido

1. Las siguientes personas no deben utilizar este producto:
 - Niños
 - Mujeres embarazadas, menstruales o lactantes
 - Personas alérgicas
 - Personas con traumatismos, eczemas, hinchazón, enfermedades de la piel, dermatitis atópica o piel