

LA * FORETT

REVEAL YOURSELF



Microdermo
abrasión



Microcorriente y
termo terapia



Limpieza
de poros



Dispositivo
recargable



IONA

Limpiador facial 4 en 1

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el dispositivo y consérvelo para futuras consultas.

■ Contenido

Aviso de seguridad para el uso
Descripción de las partes
Método de uso
Apagado inteligente
Instrucciones de la fuente de alimentación
Mantenimiento
Análisis de fallas y resolución de problemas
Especificaciones del producto

■ Aviso de seguridad para el uso

Para garantizar el uso adecuado de este producto, lea atentamente todas las precauciones de seguridad antes de usarlo. Estas precauciones de seguridad pueden ayudarlo a usar este producto correctamente para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, de usted u otras personas. ¡Cumpla con las normas de estas precauciones de seguridad!

Prohibido

1. Las siguientes personas tienen prohibido usar este producto:
 - Niños
 - Personas alérgicas
 - Personas con trastornos mentales
 - Mujeres embarazadas, en lactancia o menstruantes.
 - Personas que padecen anomalías físicas como fiebre, enfermedad cardíaca, enfermedad grave, enfermedad aguda, tumor maligno, tuberculosis, enfermedad a la sangre y otros síntomas.
 - Personas con traumatismos, eccema, hinchazón, dermatosis, dermatitis atópica o sensibilidad cutánea y personas con reguladores del ritmo cardíaco u otros dispositivos.
2. No lo use en los ojos, globos oculares, heridas, piezas de plástico, nodo de cuello o garganta y corazón, etc.
3. No utilice diluyentes, benceno u otros disolventes para limpiar este producto.
4. No sumerja este producto en agua u otros líquidos.
5. No coloque el producto cerca del fuego ni del calor, ni lo use ni lo coloque en un ambiente caluroso.
6. No deje caer ni golpee este producto para evitar dañarlo. Si el producto se daña debido a una colisión o una caída, no lo utilice.
7. No modifique, desarme ni repare este producto usted mismo. Para

reparaciones, comuníquese con la tienda donde adquirió este producto o comuníquese con el centro de servicio designado.

8. Manténgase alejado de campos electromagnéticos fuertes (no lo coloque sobre una cocina de inducción, etc.) cuando utilice este producto.

9. No utilice accesorios que no hayan sido fabricados o recomendados por nuestra empresa.

10. No dañe, ni modifique el cable, no retuerza, ni tire de él con fuerza y no enrolle el cable de carga alrededor de la máquina. de lo contrario, podría provocar un incendio o un cortocircuito. Si el cable de carga está dañado o se calienta, deje de usarlo inmediatamente.

11. No utilice el producto con las manos mojadas. Úselo con las manos secas. De otra manera, la fuente de alimentación puede tener un cortocircuito.

iAviso!

1. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

2. Compruebe si hay daños evidentes antes de utilizar este producto y no lo utilice si está dañado.

3. Si no se siente bien después de su uso, deje de usarlo y busque ayuda médica.

4. Antes y después del uso, retire la boquilla y límpiela con un hisopo de algodón humedecido en alcohol o agua. Después de que la punta esta seca, libre de alcohol o agua, instale a boquilla en el producto.

5. El uso excesivo de este producto puede dañar la piel.

6. No use exfoliantes u otros productos exfoliantes antes o después de su uso.

7. Aminorar y eliminar las arrugas requiere una succión de bajo nivel y un contacto breve con la piel para succionar. No succione la misma área por un largo periodo de tiempo.

8. Tiene una función de microdermoabrasión. que se utilizará una vez por semana en pieles secas y dos veces por semana para pieles mixtas-grasas. Se recomienda utilizarlo durante unos 5 minutos cada vez, pero el tiempo específico se puede ajustar según la condición de su piel.

9. No presione con fuerza a boquilla sobre la piel porque el dispositivo producirá una fuerte succión.

10. No lo use de forma continua en la misma área, ya que puede ocasionar que la piel se torne de color púrpura rojizo. Si llegara a suceder, deje de usarlo inmediatamente para que la piel vuelva automáticamente a la normalidad.

11. Una vez finalizado el cuidado, la piel presentará alguna irritación o enrojecimiento debido a la aceleración de la circulación interna de la


piel, pero es una condición normal, que se desvanecerá automáticamente. Por favor, proteja su piel hidratándola correctamente y protegiéndose del sol una vez haya finalizado el tratamiento.

12. Reemplace o limpie la esponja del filtro con regularidad.

13. El dispositivo se calentará después de un largo período de uso continuo. Si siente que se calienta durante el uso. Apague y deje reposar el producto durante más de 30 minutos antes de usarlo.

■ Descripción de las partes

1. Boquilla
2. Cabezal Microcorriente/
Temperatura
3. Pantalla
4. Botón “+”
5. Botón encendido / cambio
de modo
6. Botón “-”
7. Lámina micro conductora de
contacto
8. Puerto de carga USB
9. Tapa del contenedor de filtro
10. Filtro de espuma
11. Contenedor de filtro

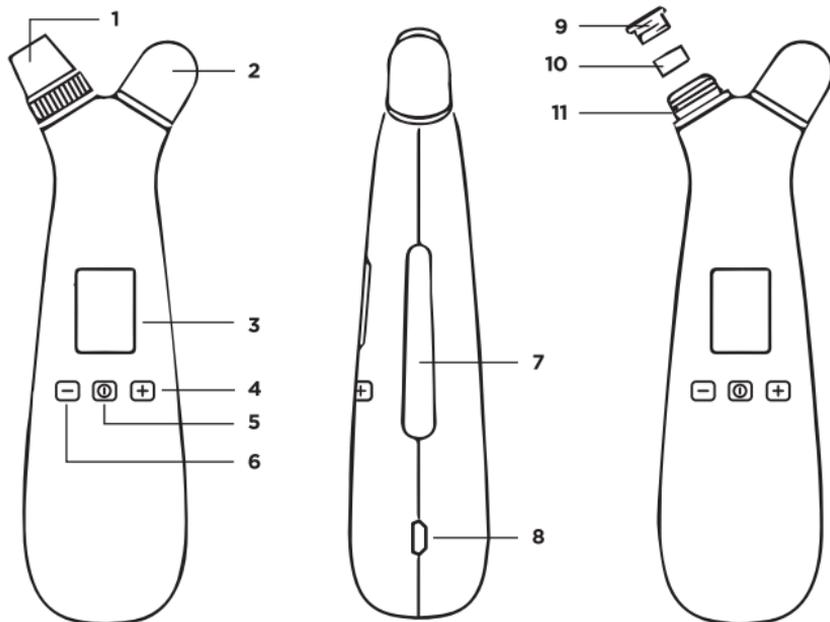

■ Función de las boquillas



**Boquilla
pequeña**



**Boquilla
elíptica**



**Boquilla
grande**



**Boquilla
Microcristalina**

1.Boquilla pequeña: succión débil, utilizada para succionar puntos negros. Adecuado para zonas de piel más delicadas.

2.Boquilla elíptica: se utiliza principalmente para levantar y apretar. Puede tensar y levantar suavemente la piel mediante la succión y desconexión repetidas para mejorar la vitalidad de su piel; aumenta la elasticidad, disminuye las líneas finas y hace que la piel sea vea más joven. No la mantenga en el mismo lugar por mucho tiempo.

3.Boquilla grande: succiona los puntos negros, aprieta y tira. Esta boquilla tiene una fuerte succión, puede ser utilizada para succionar puntos negros y también adelgazar la cara para darle la forma de V, se puede mover en una dirección repetidamente durante el uso. No la mueva de atrás hacia adelante, ni la mantenga en el mismo lugar durante demasiado tiempo.

4.Boquilla microcristalina: exfolia la piel muerta. La boquilla microcristalina eliminará la capa de la cutícula envejecida y la piel muerta de la superficie de la epidermis triturando y succionando para lograr iluminar la piel y suavizarla.

■ Método de uso

1. Abra la tapa del contenedor de filtro, coloque un filtro de espuma seco en el contenedor de filtro e instale la boquilla que se utilizará.




- I. Coloque el filtro de espuma y la tapa del contenedor de filtro a su vez.
- II. Cierre la tapa del contenedor de filtro.
- III. Atornille la boquilla seleccionada en el contenedor de filtro.

Nota:


- a) Al reemplazar el filtro de espuma, apriete la tapa del contenedor de manera giratoria y no la presione directamente para evitar afectar la succión.
- b) Al reemplazar la boquilla, apriete la misma de manera giratoria y no la presione directamente para evitar afectar la succión

2. Después de presionar el “encendido/cambio de modo” durante 2 segundos, el producto se enciende y la pantalla está encendida, por lo tanto, ingresa al modo de espera.

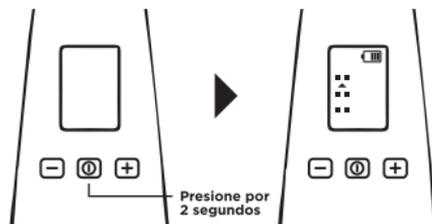

- I. Presione ligeramente el botón central durante 2 segundos
- II. El ícono de la batería, el modo frío, cálido y de eliminación de acné, y el ícono del triángulo de selección de modo en la pantalla están encendidos. Y la selección de modo predeterminada es el estado de espera para la eliminación del acné.

3. Presione ligeramente el botón “+” para iniciar el modo de eliminación de acné. Si presiona una vez, se iniciará el primer nivel de un total de cinco niveles y la función aumentará su intensidad gradualmente, mientras que si presiona el botón “-” brevemente, se reducirá, un total de cinco niveles y la función disminuirá su intensidad gradualmente. Ajuste el modo de eliminación del acné al nivel apropiado y mueva lentamente la boquilla en el área que necesita cuidados. No succione la misma parte durante mucho tiempo. Antes de retirar la boquilla de la piel, abra la boquilla desde el costado para liberar el aire de presión negativa y así removerla con mayor facilidad. No desenchaje directamente tirando hacia arriba o moviéndolo para evitar que la piel se enrojecza debido al tirón.

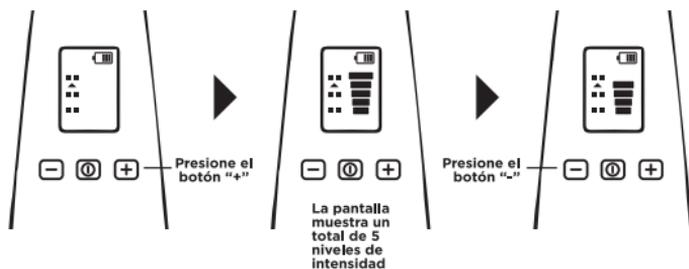

I. La función aumentará de intensidad gradualmente presionando ligeramente el botón "+".

II. Se iniciará el modo de eliminación del acné, con un total de 5 niveles de intensidad.

III. La función disminuirá de intensidad gradualmente presionando ligeramente el botón "-".

IV. Mueva hacia adelante y hacia atrás contra la piel.

V. Desencaje abriendo ligeramente desde el costado.



4. Presione ligeramente el botón "encendido/cambio de modo" para cambiar al modo de micro corriente y presione el botón "+" para iniciar el modo de micro corriente. Si presiona una vez, se iniciará en el primer nivel de un total de cinco niveles y la función aumentará su intensidad gradualmente, mientras que si presiona el botón "-" brevemente, se reducirá un total de cinco niveles y la función disminuirá su intensidad gradualmente. Ajuste el modo de micro corriente al nivel apropiado para usted y coloque el cabezal de metal en las áreas a tratar sin moverlo, muévelo a otro lugar después de que la piel tenga una ligera sensación de hormigueo. No aplique micro corriente en una misma área por un largo periodo de tiempo. El modo de micro corriente ayuda a que los poros absorban mejor la esencia de cuidado de la piel y promueve la circulación sanguínea; el efecto conductor de micro corriente es mejor con una esencia.



- I. Presione brevemente el botón "encendido/cambio de modo" para cambiar el modo a Micro corriente, y presione el botón "+" para iniciar su funcionamiento.
- II. Modo de micro corriente, posee un total de cinco niveles de intensidad; ajústelo al nivel apropiado para usted según sea necesario.
- III. Los niveles son un total de cinco, disminuirá gradualmente presionando ligeramente el botón "-".
- IV. Coloque el cabezal de metal en las áreas a tratar sin moverlo. No aplique micro corriente en una misma área por un largo periodo de tiempo. El modo de micro corriente ayuda a que los poros absorban mejor la esencia y promueve la circulación sanguínea.

5. Presione ligeramente el botón "encendido/cambio de modo" para cambiar al modo de temperatura y presione el botón "+" para iniciar su funcionamiento. Si presiona una vez, se iniciará en el primer nivel de un total de cinco niveles y la función aumentará su intensidad gradualmente, mientras que si presiona el botón "-" brevemente, se reducirá un total de cinco niveles y la función disminuirá su intensidad gradualmente. Ajuste el modo temperatura al nivel apropiado y mueva el cabezal metálico lentamente sobre las áreas que necesitan cuidados, pero no aplique temperatura a la misma parte durante mucho tiempo. El propósito del calentamiento es ayudar a abrir los poros.





I.Presione brevemente el botón "encendido/cambio de modo" para cambiar el modo a Temperatura, y presione el botón "+" para iniciar el modo frío.

II.Modos de temperatura posee un total de cinco niveles de intensidad; ajústelo al nivel apropiado para usted según sea necesario.

III.Los niveles son un total de cinco, disminuirá gradualmente presionando ligeramente el botón "-".

IV.Mueva el cabezal de metal lentamente en las áreas que necesitan cuidados, pero no aplique temperatura a la misma área durante mucho tiempo. El propósito del calentamiento es ayudar a abrir los poros.

■ Análisis de fallas y resolución de problemas

Si hay una falla durante el funcionamiento, realice las siguientes comprobaciones. Si la falla no se puede eliminar o el producto aún no puede funcionar correctamente, comuníquese con el agente de ventas o el punto de servicio postventa designado directamente. No desarme e intente reparar usted mismo el dispositivo.

Problema	Análisis de causa	Solución
No se puede iniciar	Es posible que no haya presionado el botón "encendido/cambio de modo" por el tiempo suficiente.	Presione el botón "encendido/cambio de modo" durante más de 2 segundos.
No se puede iniciar	El voltaje de la batería es bajo; por tanto, se inicia la función de autoprotección.	Use el producto después de que esté completamente cargado.
El dispositivo esta caliente	Se ha usado continuamente durante demasiado tiempo.	Apague el producto durante unos 30 minutos.
No carga	El cable de carga no está conectado o la computadora no está encendida / el adaptador no está encendido	Conecte el cable de carga correctamente y confirme que la computadora está encendida / que el adaptador está encendido.

■ Especificación e inspección del producto

Voltaje / corriente de carga: DC 5V 0.6A

Especificación de la batería:

Batería de polímero de litio 18500 3.7V 1400mAh

Potencia nominal: 5,5W

Material del producto: ABS

Temperatura cálida: $45 \pm 2^{\circ}\text{C}$

Tamaño del producto: 181 x 57.5 x 42mm

Peso del producto: 174g

Grado de vacío máximo: $\leq 65\text{kpa}$

Estándar: GB 4706.15 - 2008