



CARA Sueño excepcional.

Asiento perfecto, gran comodidad, respiración agradable y silenciosa y excelente tolerancia cutánea: las máscaras para nariz o para nariz y boca de la familia CARA perfeccionan tales requisitos de un modo moderno.

Nuestras exitosas máscaras CARA convencen por su ligereza, por una almohadilla de máscara suave y flexible que se adapta a la perfección, por las excelentes posibilidades de ajuste y por otros detalles interesantes.

CARA ofrece la solución correcta para prácticamente cualquier usuario de la máscara.



Colocación sencilla de CARA.



Suelte los dos clips de la máscara.



Colóquese las cintas en la cabeza.



Fije los clips en la parte inferior de la máscara.



Ajuste también las cintas superiores para la cabeza de forma que queden tan flojas como sea posible, pero proporcionando la necesaria sujeción.



Ajuste también las cintas inferiores para la cabeza de forma que queden tan flojas como sea posible, pero proporcionando la necesaria sujeción.



Ajuste la cinta en la cabeza de modo que no choque abajo con los lóbulos de las orejas.



Ajuste el soporte frontal lo más flojo posible, ya que no debe apretar.



Encontrará nuestro vídeo para usuarios en YouTube.

Almohadillas de la máscara: precisas y estables

La primera impresión es la que cuenta. La almohadilla de la máscara es blanda y flexible. Se adapta de forma precisa al contorno de cada rostro y, por lo tanto, ofrece una comodidad duradera, incluso sin soporte frontal.

Perfeccionar lo que funciona: increíblemente silencioso

El sistema de espiración en forma de rendija situado cerca de la conexión esférica lleva décadas demostrando su eficacia. La familia CARA lo ha perfeccionado. El menor número de piezas facilita la manipulación, reduce el peso y ayuda al medioambiente gracias a la menor producción y eliminación de materiales. No obstante, se mantiene el flujo de aire difuso para no molestar ni al paciente ni al compañero de cama, así como la zona cerrada superior para impedir que fluya aire hacia los ojos.

CARA es excepcional

CARA no solo puede convencerle a usted, sino que ha recibido el galardón internacional de diseño Focus Open.

También ha logrado convencer al Institut Hohenstein, un organismo independiente. Solo los tejidos sin sustancias nocivas para la salud reciben el sello del estándar OEKO-TEX STANDARD 100, reconocido en todo el mundo, así como las cintas para la cabeza de la familia CARA.



Focus Open 2016
Special Mention


BADEN-WÜRTTEMBERG
INTERNATIONAL DESIGN AWARD



Control de sustancias nocivas.
www.oeko-tex.com/standard100

Las ventajas de CARA

- Almohadilla de máscara blanda y flexible en tres tamaños
- Sistema de espiración silencioso y difuso **1a, 1b**
- Ligera **2**
- Cintas para la cabeza codificadas por colores, zona de color superior (petróleo o syrah)
- Posibilidad de ajustar la cinta superior de la cabeza para que se asiente a la perfección en cualquier tamaño **3**
- Se puede colocar o fijar **4a, 4b**
- Cuerda de apertura para un desmontaje rápido **5**
- Conexión esférica con 360° y giro en 3D para una libertad de movimiento absoluta **6**
- Material extremadamente resistente

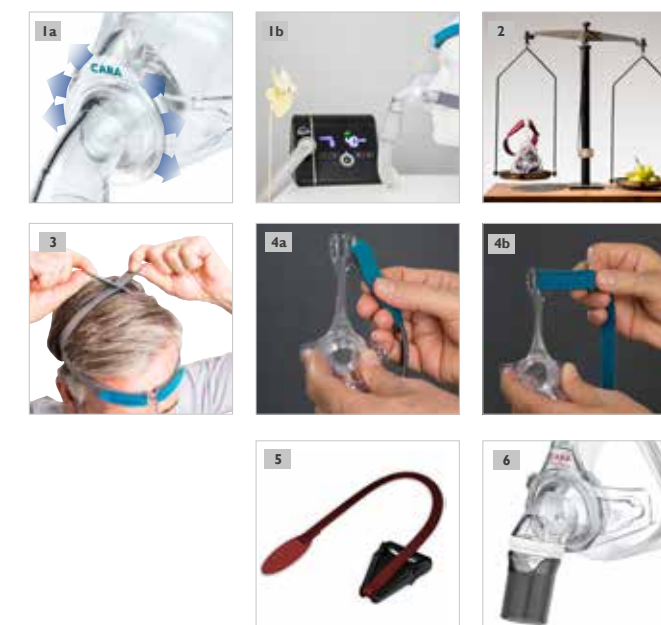

CARA - Fabricado en Alemania



Piezas de recambio

Cinta para la cabeza CARA
incl. clips para cintas
XS: WM 25191
Estándar: WM 25192



Cinta para la cabeza
CARA Full Face
incl. clips para cintas
WM 25243



Almohadilla de máscara
CARA
Tamaño XS: WM 25189
Tamaño S/M: WM 25238
Tamaño M/L: WM 25239



Almohadilla de máscara
CARA Full Face
Tamaño S: WM 25601
Tamaño M: WM 25602
Tamaño L: WM 25603



Cuerda de apertura
CARA Full Face
WM 25623



Puede obtener más información sobre nuestras soluciones terapéuticas, accesorios y sistemas de máscara en loewensteinmedical.de

Datos técnicos

	CARA	CARA Full Face
Clase de producto según la Directiva 93/42/CEE	II a	II a
Dimensiones (An x Al x P)	72 x 112 x 70 mm (tamaño XS) 72 x 117 x 70 mm (tamaño S/M) 72 x 118 x 70 mm (tamaño M/L)	93 mm x 145 mm x 89 mm (tamaño S) 95 mm x 160 mm x 90 mm (tamaño M) 95 mm x 174 mm x 91 mm (tamaño L)
Peso	58 g (tamaño XS) 59 g (tamaño S/M) 60 g (tamaño L/M)	93 g (tamaño S) 97 g (tamaño M) 102 g (tamaño L)
Presión de terapia	4 cmH ₂ O - 30 cmH ₂ O	4 cmH ₂ O - 25 cmH ₂ O
Cono para conexión de tubo flexible conforme a EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (macho)	Ø 22 mm (macho)
Rango de temperatura • En uso: • Almacenamiento:	+5 °C a +40 °C -20 °C a +70 °C	+5 °C a +40 °C -20 °C a +70 °C
Resistencia al flujo • a 50 l/min • a 100 l/min	0,2 cmH ₂ O 0,9 cmH ₂ O	0,15 cmH ₂ O 0,5 cmH ₂ O
Resistencia al flujo de la válvula antiasfixia • Inspiración a 50 l/min • Espiración a 50 l/min	-	0,6 cmH ₂ O 0,8 cmH ₂ O
Intensidad acústica de la válvula antiasfixia • Abrir: • Cerrar:	-	0,5 cmH ₂ O 2,2 cmH ₂ O
Valor indicado de emisión de ruidos, dos cifras, según ISO 4871: • Nivel de intensidad acústica: • Nivel de potencia acústica: • Factor de incertidumbre:	18 dB(A) 26 dB(A) 3 dB(A)	19 dB(A) 27 dB(A) 3 dB(A)
Tiempo de uso	hasta 12 meses ¹	hasta 12 meses ¹
Normas aplicadas	EN ISO 17510-2:2009	EN ISO 17510-2:2009

¹ Los materiales utilizados para la fabricación de máscaras envejecen si están expuestos, p. ej., a productos de limpieza corrosivos. Por lo tanto, en algún caso particular puede ser necesario sustituir piezas de la máscara dentro de un tiempo menor al previsto.

CE 0197

Descripción del equipo	Tamaño	Artículo n.º	Descripción del equipo	Tamaño	Artículo n.º
CARA Nasal	XS	WM 25590	CARA Full Face	S	WM 25630
CARA Nasal	S/M	WM 25600	CARA Full Face	M	WM 25640
CARA Nasal	M/L	WM 25610	CARA Full Face	L	WM 25650

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalweg 40, 22525 Hamburgo
Alemania
T: +49 40 547 02 0
F: +49 40 547 02 461
info@loewensteinmedical.de
www.loewensteinmedical.de



© Protegido por las leyes de propiedad intelectual. Reproducción de cualquier tipo solo con la autorización expresa de Löwenstein Medical Technology. Todos los datos son sin garantía por motivos relacionados con la técnica de impresión.



NUEVO
CARA Full Face
CARA XS

CARA
Sueño excepcional.



CARA
FAMILIA